

ליקסומיה 10 mcg

10 mcg

ליקסומיה 10 mcg מחול לחق

תמיסה להזרקה

הוראות שימוש

כל עט מוכן לשימוש מכיל 14 מנות, כל מנה מכילה 10 מיקרוגרם ב- 0.2 מ"ל.

תعليمات الإستعمال

يحتوي كل قلم جاهز للإستعمال على 14 مقدار دوائي، يحتوي كل مقدار دوائي على 10 ميكروغرام في 0.2 مل.


חלק 1 - מידע חשוב

קרא הוראות אלו בעיון לפני השימוש בעט ליקסומיה שלך.
שמור עלון זה לשימוש בעתיד.

- מידע על עט ליקסומיה**
ליקסומיה מגיעה כעט מוכן לשימוש המיועד להזרקה.
- יש להזריק רק מנה אחת ליום.
 - כל עט ליקסומיה מכיל 14 מנות מדודות מראש. אין צורך למדוד כל מנה.
 - היועץ ברופא, ברקוח או אחות לגבי אופן ההזרקה הנכון, לפני שימוש בעט.
 - אם אינך יכול למלא אחר כל ההוראות במלואן בעצמך, או שאינך מסוגל לתפעל את העט (למשל, אם יש לך בעיות ראייה), השתמש בו רק אם יש מי שיעזור לך.

اقرأ هذه التعليمات بتمعن قبل إستعمال قلم ليكسوميا الخاص بك.
إحفظ هذه النشرة للإستعمال في المستقبل.

- معلومات عن قلم ليكسوميا**
ليكسوميا متوفر على شكل قلم جاهز للإستعمال مخصص للحقن.
- يجب أن تحقن مقدار دوائي واحد فقط في اليوم.
 - يحتوي كل قلم ليكسوميا على 14 مقدار دوائي تم قياسه مسبقاً. لا حاجة لقياس كل مقدار دوائي.
 - إستشر الطبيب، الصيدلي أو الممرضة حول كيفية الحقن الصحيح، قبل إستعمال القلم.
 - إذا لم تكن قادراً على تنفيذ كافة التعليمات بنفسك، أو أنك غير قادر على تشغيل القلم (مثلاً، إذا كنت تعاني من مشاكل في الرؤية)، إستعمله فقط إذا كان هناك من يساعدك.

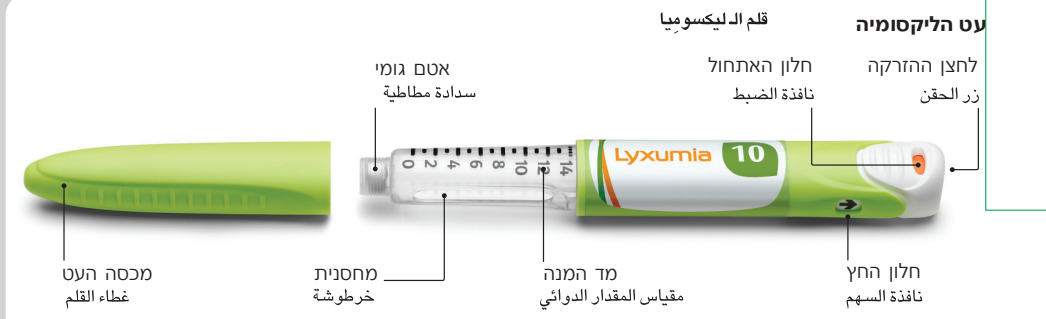


- עט זה מיועד לאדם אחד בלבד. אל תחלוק אותו עם אף אדם אחר.
- בדוק תמיד את התווית כדי לוודא שיש לך את עט הליקסומיה הנכון. בנוסף, בדוק שתאריך התפוגה לא חלף. שימוש בתרופה לא נכונה יכול להזיק לבריאותך.
- אל תנסה להוציא נוזל מתוך המחטניט באמצעות מזרק.



בוכנה שחורה
הבוכנה תזוז לאורך מד המנה לאחר כל הזרקה. בדוגמא למעלה, מספר המנה מראה כי נותרו 13 זריקות.

מכיס אסוד
סוף יתחرك المكبس على طول مقياس المقدار الدوائي من بعد كل حقنة. في المثال أعلاه، يبين رقم المقدار الدوائي بأنه قد بقي 13 حقنة.

המחט (נרכשת בנפרד) إبرة (تشتري على حدة)

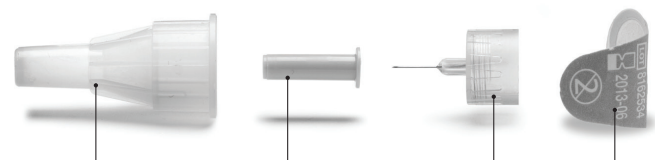

- השתמש אך ורק במחטים שאושרו לשימוש עם ליקסומיה. השתמש במחטי עט חד-פעמיות של 29G עד 32G עם עט הליקסומיה שלך. שאל את הרופא, הרקוח או האחיות איזה עובי ואורך של מחט מתאים ביותר עבורך.
- כאשר הוריקה ניינתת על-ידי אדם אחר, עליו להיזהר שלא לפצוע בטעות מישהו עם המחט. הדבר עלול להעביר זיהומים. השתמש תמיד במחט חדשה עבור כל הזרקה. הדבר עוזר למנוע זיהום של הליקסומיה או אפשרות של סתימה במחט.

- إستعمل فقط إبر تم المصادقة عليها للإستعمال مع ليكسوميا. إستعمل إبر قلم أحادية الإستعمال ذات 29G حتى 32G مع قلم ليكسوميا الخاص بك. إسال الطبيب، الصيدلي أو الممرضة حول سماكة وطول الإبرة الأكثر ملائمة بالنسبة لك.
- عندما تعطى الحقنة من قبل شخص آخر، عليه أن يكون حذراً كي لا يصيب بالخطأ شخص آخر بالإبرة. قد يؤدي هذا الأمر إلى نقل تلوثات.
- إستعمل دائماً إبرة جديدة لكل عملية حقن. هذا يساعد في منع تلوث ال ليكسوميا أو إمكانية إندساد في الإبرة.

חלק 2 - מתחילים

אתחל את העט באותו יום בו תהיה ההזרקה הראשונה שלך

- ראשית, אתחל את העט החדש שלך**
- לפני הזרקה מנה - לפני ההזרקה הנך חייב קודם להוציא נוזל עודף מהעט החדש שלך. הדבר נעשה פעם אחת ונקרא תהליך ה"אתחול". שלבים 1 עד 5 המופיעים מטה מראים לך כיצד לעשות זאת.
 - האתחול נעשה על מנת לוודא כי העט עובד בצורה נכונה וכי המנה להזרקה הראשונה שלך מדויקת.
 - אל תחזור על תהליך האתחול, אחרת לא תקבל 14 מנות מעט הליקסומיה שלך.

• **קמ בציטת הצלם פי נפס יום חפנתק האולוי**

- אולא, קמ בציטת הצלם החדיד חאסתק
• **קבל חפן מקדאר דואטי** - קבל החפן דואטי - קבל החפן עליה אולא אן תחרג פאטס הסאל מן קלמק החדיד. יתם הקיאר בהזא מרה אמה ויסמי עמליה אל "צבט". תבין לק המרחל א חתי המוגדה אנהא קיפ יתם הקיאר בהזא.
• יתם הקיאר בצבט התאק באן הצלם יעמל בשכל סחיב ובאן המקדאר הדואטי לחפנתק האולוי דקיף.
• **לא תכור עמליה הצבט**, ואלא פלן תחשל עלוי 14 מקדאר דואטי מן קלם ליקסומיה חאסתק.

התמונות שלהלן מראות כיצד משתנה חלון האתחול הנמצא בלחצן ההזרקה שבעט שלך לאחר האתחול.

<p>עט חדש (חלון כתום)</p>	<p>עט מוכן להזרקה (חלון לבן)</p> <p>העט מוכן להתחיל להזרקה. החלון נשאר לבן לאחר האתחול.</p>
<p>עט חדש (חלון כתום)</p> <p>העט מוכן להתחיל להזרקה. החלון נשאר לבן לאחר האתחול.</p>	<p>עט מוכן להזרקה (חלון לבן)</p> <p>העט מוכן להתחיל להזרקה. החלון נשאר לבן לאחר האתחול.</p>

כיצד להתחיל את עט הליקסומיה החדש שלך

שלב 1
הסר את מכסה העט ובדוק את העט. אינרע געא הצלם ואפחצ הצלם.

שלב 1
מחלה 1



בדוק כי חלון האתחול כתום. איפחצ באן נאפדה הצבט ברקאליה.

בחן את הנוזל. עליו להיות צלול וחסר צבע, ללא חלקיקים. אם אינו כך, אל תשתמש בעט זה. צור קשר עם הרופא או הרקוח.


איפחצ הסאלל. יגיב אן יכונ סאפי ועדימ הלון, מן דונ גזיאת. אזה למ יכנ קזל, לא תסעמל הזא הצלם. איסל באלפיבי או הסידלי.

שלב 2
חבר מחט והסר את מכסי המחט. אוסל אברה ואנרע אעטיה האברה.

שלב 2
מחלה 2



השתמש תמיד במחט חדשה להתחול. הסר את אטם המגן ממכסה המחט החיצוני. יישר את המחט אל מול העט. המשך להחזיקה ישר בזמן ההברגה על העט.

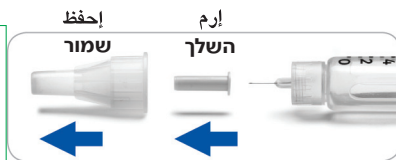


היזהר שלא לפצוע את עצמך כשהמחט חשופה. הסר את מכסה המחט החיצוני והפנימי. שמור את מכסה המחט החיצוני - תזדקק לו בהמשך כדי להסיר את המחט.

איסעמל דאמא אברה חדידה לצבט. אינרע הסדאה האקטיה ען געא האברה הארחי. קמ בתסויה האברה מקבל הצלם. איסטר באמסאק בהא בשכל מסעקימ חלאל הלוליה עלוי הצלם.


אינתי לעמ אסאבה נפסק ענדהא תכונ האברה מכשופה. אינרע געא האברה הארחי והאחלי. איפחצ געא האברה הארחי - סופ תחאג לה לאחא לתנרע האברה.

שלב 3
משוך כלפי חוץ את לחצן ההזרקה. איסב זר החפן נחו הארח.

שלב 3
מחלה 3

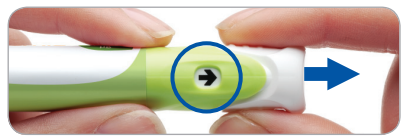

משוך בחוזקה את לחצן ההזרקה כלפי חוץ עד שהוא נעצר.

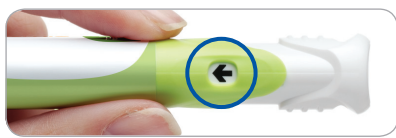

כעת יצביע החץ לכיוון המחט. האן סופ ישייר הסהם באתא האברה.

איסב בקוה זר החפן נחו הארח חתי יתוקפ.

שלב 4
לחץ והחזק את לחצן ההזרקה להוצאת נוזל עודף. איצפט ואמסק זר החפן לארח פאטס הסאלל

שלב 4
מחלה 4



כוון את המחט אל מיכל מתאים (כמו כוס נייר או טישו) לאיסוף הנוזל כך שניתן יהיה להשליך אותו.
לחץ על לחצן ההזרקה פנימה עד הסוף. אתה עשוי לחוש או לשמוע "קליק".
המשך ללחוץ על לחצן ההזרקה וספור באיטיות עד חמש על מנת להוציא את הטיפות האחרונות.



אם אין כלל יציאה של נוזל ראה חלק "שאלות ותשובות". בדוק כי חלון האתחול כעת לבן.

קמ בתוגיה האברה אלי חואיה מלאמה (מל קאס ורק או מנדיל) לקמ הסאלל בחיט יכונ רמיה.
איצפט עלוי זר החפן אלי האחל חתי הנחיה. קד תשער או תסעם "קליק".
איסטר באצפט עלוי זר החפן ועד בייטע חתי חמסה לארח הצקרות האחריה.

שלב 5
העט מאותחל כעת. אין להתחיל עט זה שוב. עבור ההזרקה הראשונה שלך עבור ישר לחלק 3 - שלב ג.

שלב 5
מחלה 5

אין צורך להחליף את המחט בין האתחול לבין ההזרקה הראשונה שלך.
הצלם מצבוט האן לא יגור צבט הזא הצלם חאטיה.
לאגל חפנתק האולוי אינעל מביארה אלי הגזא 3 - מחלה ג.
לא חאה לתבדיל האברה בין הצבט ובין עמליה החפן האולוי לדיק.

<MAT>000000

חלק 3 – שימוש יומי בעט

עקוב אחר חלק זה רק כאשר חלון האתחול לִבֵן.

הזרק מנה אחת בלבד בכל יום.

جزء ٣ – الإستعمال اليومي بالقلم

تعقب هذا الجزء فقط عندما تكون نافذة الضبط بيضاء.

قم بحقن مقدار دوائي واحد فقط في كل يوم.

שלב
א
مرحلة
א

הסר את מכסה העט ובדוק את העט
إنزع غطاء القلم وافحص القلم



בדוק שחלון האתחול לִבֵן. אם הוא כתום, עבור לחלק 2.
בדוק את התווית על העט שלך בכדי לוודא כי יש בידך את התרופה הנכונה.

إفحص بأن نافذة الضبط بيضاء. إذا كانت برتقالية، انتقل إلى الجزء ٢
إفحص الملصقة الموجودة على قلمك للتأكد بأن ما بين يديك هو الدواء الصحيح.

בדוק את מספר המנות בעט. המספר מוצג באמצעות המיקום של הבוכנה השחורה במד המנה.

הזכור את מספר המנות המיועדות לך. אם אינו כך, אל תשתמש בעט זה.

במקרה שישנן בועות אוויר, ראה חלק "שאלות ותשובות".

إفحص عدد المقادير الدوائية في القلم. يتم عرض الرقم من خلال موضع المكبس الأسود في مقياس المقدار الدوائي.

إفحص السائل. يجب أن يكون صافي و عديم اللون، من دون جزيئات. إذا لم يكن كذلك، لا تستعمل هذا القلم.

في حال وجود فقاعات هواء، انظر جزء «أسئلة وأجوبة».

חבר מחט חדשה והסר את מכסי המחט

قم بوصل إبرة جديدة وإنزع أغطية الإبرة



הזהר שלא לפצוע את עצמך כשהמחט חשופה. הסר את מכסה המחט החיצוני והפנימי. שמור את מכסה המחט החיצוני - תזרקק לו בהמשך כדי להסיר את המחט.

إنتبه لعدم إصابة نفسك عندما تكون الإبرة مكشوفة. إنزع غطاء الإبرة الخارجي والداخلي. إحتفظ غطاء الإبرة الخارجي - سوف تحتاجه لاحقاً لتنزع الإبرة.



השתמש תמיד במחט חדשה עבור כל הזרקה. הסר את אטם המגן ממכסה המחט החיצוני. ישר את המחט אל מול העט. המשך להחזיקה ישר בזמן ההברגה על העט.

إستعمل دائماً إبرة جديدة لكل عملية حقن. إنزع السداة الواقية عن غطاء الإبرة الخارجي. قم بتسوية الإبرة مقابل القلم. إستمر بالإمسك بها بشكل مستقيم خلال اللولبة على القلم.

שלב
ב
مرحلة
ב

משוך כלפי חוץ את לחצן ההזרקה

إسحب زر الحقن نحو الخارج



כעת יצביע החץ לכיוון המחט.



משוך בחוזקה את לחצן ההזרקה כלפי חוץ עד שהוא נעצר.

إسحب بقوة زر الحقن نحو الخارج باتجاه السهم حتى يتوقف.

שלב
ג
مرحلة
ج

לחץ והחזק את לחצן ההזרקה כדי להזריק את המנה

إضغط وأمسك زر الحقن لحقن المقدار الدوائي



5 secs



אחוז בקפל עור והחדר את המחט (ראה בחלק "אתרים להזרקה" היכן להזריק).
לחץ על לחצן ההזרקה פנימה עד הסוף. אתה עשוי לחוש או לשמוע "קליק".
המשך ללחוץ על לחצן ההזרקה וספור באיטיות עד חמש על מנת לקבל את המנה במלואה.
כעת ניתנה לך המנה שלך. משוך את המחט החוצה מהעור.

أمسك ثنية جلد وأدخل الإبرة (انظر جزء «مواقع للحقن» أين تحقن).
إضغط على زر الحقن إلى الداخل حتى النهاية. قد تشعر أو تسمع «كليك».
إستمر بالضغط على زر الحقن وعد ببطء حتى خمسة لتلقى المقدار الدوائي بكامله.
الآن قد تلقيت مقدارك. اسحب الإبرة للخارج من الجلد.

שלב
ד
مرحلة
د


הסר והשלך את המחט לאחר כל הזרקה.

إنزع وإرم الإبرة من بعد كل عملية حقن.



שאל את הרוקח כיצד להשליך מחטים שאינך משתמש בהן יותר.

הרכב בחזרה את מכסה העט.

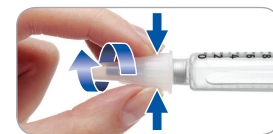

צבט את מכסה המחט החיצוני כדי לתפוס את המחט ובעזרתו הברג החוצה את המחט מהעט.



הנח את מכסה המחט החיצוני על משטח ישר. כוון את המחט אל תוך מכסה המחט החיצוני.
הרכב חזרה את מכסה המחט החיצוני על המחט.
זעם גطاء الإبرة الخارجي على سطح مستوي. قم بتوجيه الإبرة لداخل غطاء الإبرة الخارجي.
أعد تركيب غطاء الإبرة الخارجي على الإبرة.

שלב
ה
مرحلة
ه

חזור על כל השלבים של חלק 3 עבור כל הזרקה.

השלך את העט 14 ימים לאחר האתחול. עשה זאת גם אם נשארה מעט תרופה בתוך העט.

كرر كافة خطوات الجزء ٣ لكل عملية حقن.

إرم القلم بعد ١٤ يوماً بعد الضبط. قم بهذا حتى لو بقي قليل من الدواء في داخل القلم.

שלב
ו
مرحلة
و

טבלת הפעלה והשלכה
רשום בטבלה את התאריך בו אתחלת את העט שלך ואת התאריך בו יש להשליכו, 14 ימים לאחר מכן.

עט	תאריך אתחול	תאריך השלכה
1		
2		
3		
4		
5		
6		

قائمة تشغيل ورمي

سجل في القائمة التاريخ الذي ضبطت فيه قلمك والتاريخ الذي يجب فيه رميه، من بعد ١٤ يوماً.

قلم	تاريخ الضبط	تاريخ الرمي
١		
٢		
٣		
٤		
٥		
٦		

אחסנה

التخزين

מידע כללי

- שמור את עטי הליקסומיה שלך במקום סגור הרחק משישג ידם ושדה ראייתם של ילדים.
- הגן על עטי הליקסומיה שלך מפני אבק ולכלוך.
- הרכב את מכסה העט לאחר כל שימוש על מנת להגן מאור.
- אין להשתמש בליקסומיה אחרי תאריך התפוגה הרשום על גבי התווית ועל גבי הקרטון. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.

לפני אתחול העט:

- שמור במקרר את עטי הליקסומיה שלך שטרם היו בשימוש, בטמפרטורה של 2°C עד 8°C.
- אין להקפיא עטי ליקסומיה ואין להשתמש בליקסומיה אם הוקפאה.
- הנח לעט שלך להתחמם בטמפרטורת החדר לפני השימוש.

לאחר אתחול העט:

- לאחר האתחול יש לאחסן את עט הליקסומיה מתחת ל-30°C. אין להקפיא ליקסומיה לאחר שעברה אתחול.
- אין לאחסן עט ליקסומיה כשהמחט מחוברת אליו. אם המחט מחוברת, היא עלולה להוביל לזיהום ולאפשרות של כניסת אוויר, מצב שעלול להשפיע על דיוק המנה.
- מהרגע שעט הליקסומיה שלך עבר אתחול ניתן להשתמש בו למשך עד 14 יום. השלך עט ליקסומיה משומש לאחר 14 יום. עשה זאת גם אם נשארה מעט תרופה בתוך העט.

معلومات عامة

- إحفظ أقلام لیکسومیا خاصتک في مکان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال.
- إحم أقلام لیکسومیا خاصتک من الغبار والوسخ.
- قم بتركيب غطاء القلم من بعد كل إستعمال لحمايته من الضوء.
- لا یجوز إستعمال لیکسومیا من بعد انقضاء تاریخ الصلاحية المسجل على الملصقة وعلى الكرتون. يشير تاریخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

قبل ضبط القلم:

- إحفظ أقلام لیکسومیا خاصتک غير المستعملة في البراء، بدرجة حرارة ٢ درجة مئوية حتى ٨ درجة مئوية.
- لا یجوز تجمید أقلام لیکسومیا ولا یجوز إستعمال لیکسومیا إذا تجمد.
- دع قلمك یتبلغ درجة حرارة الغرفة قبل الإستعمال.

من بعد ضبط القلم:

- بعد الضبط یجب تخزين قلم لیکسومیا دون ٢٠ درجة مئوية. لا یجوز تجمید لیکسومیا من بعد أن تم ضبطه.
- لا یجوز تخزين قلم لیکسومیا والإبرة موصولة به. إذا كانت الإبرة موصولة، فقد تؤدي لتلوث وإمكانية دخول هواء، وضع قد يؤثر على دقة المقدار الدوائي.
- من اللحظة التي قد تم فيها ضبط قلم ال لیکسومیا خاصتک یمکن إستعماله لمدة حتى ١٤ يوماً. قم برمي قلم لیکسومیا مستعمل من بعد ١٤ يوماً. قم بذلك حتى لو بقي قليل من الدواء في داخل القلم.

השלכה

רמי

- הרכב בחזרה את מכסה העט לפני שתשליך את עט הליקסומיה שלך.
- השלך את עט הליקסומיה שלך. שאל את הרוקח כיצד יש להשליך תרופות שאינך משתמש בהן יותר.
- אעד טריק גطاء القلم قبل أن ترمي قلم لیکسومیا الخاص بك.
- قم برمي قلم لیکسومیا الخاص بك. أسأل الصيدلي كيف یجب التخلص من أدوية لم تعد تستعملها.

תחזוקה

صيانة


- נהג בעט הליקסומיה שלך בזהירות.
- ניתן לנקות את עט הליקסומיה שלך מבחוץ על-ידי ניגובו במטלית לכה.
- אין לטבול, לרחוץ או למרוח בנוזל (לשמן) את עט הליקסומיה שלך, זה עלול להזיק לו.
- אם אתה חושב שישנן כו כי עט הליקסומיה שלך פגום, אל תשתמש בו. אל תנסה לתקן את העט.

- إتبع الحذر في تعاملك مع قلم ال لیکسومیا خاصتک.
- یمكن تنظيف قلم ال لیکسومیا خاصتک من الخارج من خلال مسحه بمنديل رطب.
- لا یجوز غمس، غسل أو دهن بسائل (تزيین) قلم لیکسومیا الخاص بك، هذا قد یضر به.
- إذا كنت تظن بأن قلم ال لیکسومیا خاصتک قد یتكون معطوباً، لا تستعمله. لا تحاول تصليح القلم.

אתרים להזרקה

مواقع للحقن

חזית מקדמה גב ظهر

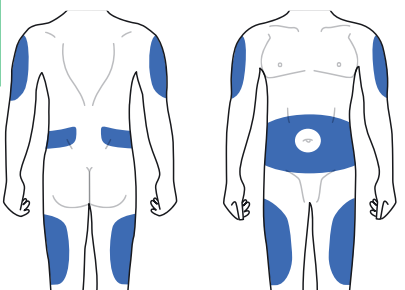

יש להזריק ליקסומיה תת עורית, וניתן להזריקה בכל אחד מהאזורים המוצגים למעלה בכחול. אזורים אלו הם הירך, הבטן והזרוע העליונה. שאל את הרופא, הרוקח או האחיות, כיצד להזריק בצורה נכונה.

یجب حقن لیکسومیا تحت الجلد، یمکن حقنه في كل من الأماكن المعروضة أعلاه بالأزرق. هذه المناطق هي الفخذ، البطن وأعلى الذراع. إسأل الطبيب، الصيدلي أو الممرضة، حول كيفية الحقن بالشکل الصحيح.

שאלות ותשובות

أسئلة وأجوبة

ماذا لو نسيت ضبط قلم لیکسومیا أو حقنت لنفسی قبل الضبط؟
إذا حقنت لنفسك قبل ضبط القلم، لا تصحح ذلك من خلال إعطاء حقنة إضافية. إستشر الطبيب أو الصيدلي بخصوص فحص مستوى السكر في دمك.

ماذا لو وجدت فقاعات هواء في الوعاء؟

وجود فقاعات هواء صغيرة في الوعاء هو وضع طبيعي – إنها لن تمس بك. سوف یتقار المقدار الدوائي صحیح یمکنك الإستمرار ومتابعة التعليمات. إتصل بالطبيب أو الصيدلي إذا كنت بحاجة لمساعدة.

ماذا لو لم یخرج سائل خلال الضبط؟

قد تكون الإبرة مسدودة أو أنه لم تتم لولبتها كما ينبغي على القلم. إنزع الإبرة عن القلم، قم بوصول إبرة جديدة وكرر المراحل ٤ و ٥ فقط. إذا لم یخرج سائل بعد، قد یتكون قلم لیکسومیا خاصتک معطوباً. لا تستعمل عبلة لیکسومیا هذه. إتصل بالطبيب أو الصيدلي للحصول على مساعدة.

ماذا لو كان من الصعب الضغط على زر الحقن للداخل حتى النهاية؟

قد تكون الإبرة مسدودة أو لم تتم لولبتها كما يجب على القلم. أخرج الإبرة من جلدك وإنزع الإبرة عن القلم. قم بتوصیل إبرة جديدة وكرر المراحل ٤ و ٥ فقط. إذا لم یخرج سائل حتى الآن، قد یتكون قلم لیکسومیا خاصتک معطوباً. لا تستعمل هذه العبلة من لیکسومیا. إتصل بالطبيب أو الصيدلي للحصول على مساعدة.

إذا كانت لديك أسئلة أياً كانت بخصوص لیکسومیا أو بخصوص السكري، إسأل الطبيب أو الصيدلي.

للأسئلة بخصوص تشغيل القلم یمکنك الإتصال على الخط الساخن الخاص بسانوفي أفتنتس بهاتف رقم ٩٠٠-٢٠٠-٨٠٠-١

מה אם שכחתי לאתחל את עט הליקסומיה או שהזרקתי לעצמי לפני האתחול?

אם הזרקת לעצמך לפני אתחול העט, אל תתקן זאת על-ידי מתן זריקה נוספת. היוועץ ברופא או ברוקח לגבי בדיקת רמת הסוכר בדמך.

מה אם יש בועות אוויר במיכל?

הימצאות בועות אוויר קטנות במיכל היא מצב תקין - הן לא יפגעו בך. המנה שלך תהיה נכונה ואתה יכול להמשיך ולעקוב אחר ההוראות. צור קשר עם הרופא או הרוקח אם אתה זקוק לעזרה.

מה אם אין יציאה של נוזל במהלך האתחול?

ייתכן שהמחט חסומה או שלא הוברגה כראוי על העט. הסר את המחט מהעט, חבר מחט חדשה וחזור על שלבים 4 ו- 5 בלבד. אם עדיין לא יוצא נוזל, ייתכן כי עט הליקסומיה שלך פגום. אל תשתמש באריות ליקסומיה זו. צור קשר עם הרופא או הרוקח לקבלת עזרה.

מה אם קשה ללחוץ על לחצן ההזרקה פנימה עד הסוף?

ייתכן שהמחט חסומה או שלא הוברגה כראוי על העט. הוצא את המחט מהעור שלך והסר את המחט מהעט. חבר מחט חדשה וחזור על שלבים 4 ו- 5 בלבד. אם עדיין לא יוצא נוזל, ייתכן כי עט הליקסומיה שלך פגום. אל תשתמש באריות ליקסומיה זו. צור קשר עם הרופא או הרוקח לקבלת עזרה.

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי ליקסומיה או לגבי סוכרת, שאל את הרופא או הרוקח.

לשאלות הקשורות לתפעול העט ניתן להתקשר לקו החם של סאנופי-אוונטיס בטלפון 1-800-300-900.