




# הוראות שימוש

## פראלואנט 75 מ"ג/1 מ"ל תמיסה להזרקה בעט מוכן לשימוש

החלקים של עט הפראלואנט מתוארים בתמונה זו.

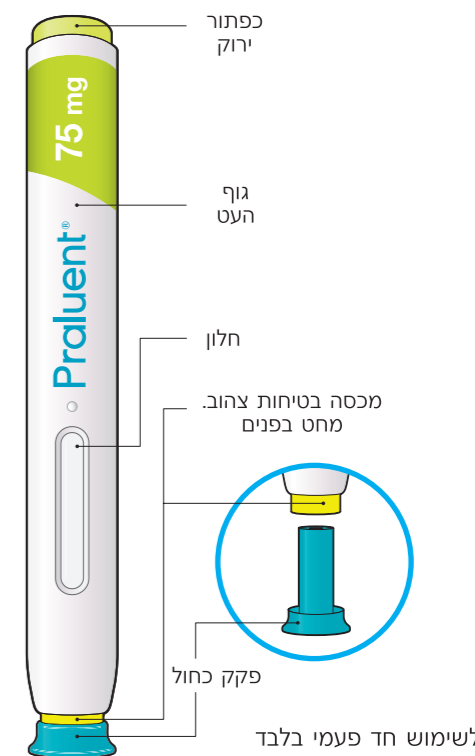

לשימוש חד פעמי בלבד

### מידע חשוב

- \* התרופה מוזרקת מתחת לעור שלך ויכולה להינתן על ירך או להינתן בעזרת מישהו אחר (מטפל).
- \* ניתן להשתמש בעט זה רק פעם אחת, לאחר השימוש יש להשליכו.

### עשה:

- ✓ שמור את עט הפראלואנט מחוץ להישג ידם ושדה ראייתם של ילדים.
- ✓ קרא בעיון את כל ההוראות לפני השימוש בפראלואנט.
- ✓ נהג לפי ההוראות בכל פעם שאתה משתמש בעט פראלואנט.

### אל תעשה:

- ✗ אל תיגע במכסה הבטיחות הצהוב.
- ✗ אל תשתמש בעט אם הוא נפל או נפגע.
- ✗ אל תשתמש בעט אם הפקק הכחול חסר או לא מחובר בצורה בטוחה.
- ✗ אל תעשה שימוש חוזר בעט.
- ✗ אל תנער את העט.
- ✗ אל תקפיא את העט.
- ✗ אל תחשוף את העט לאור שמש ישיר.

### שמור על הוראות אלו. אם יש לך שאלה פנה לרופא, לרוקח או לאחות.


### שלב א: הכנה להזרקה

#### לפני שתחיל הכן לעצמך:

- \* עט הפראלואנט
- \* פדי אלכוהול
- \* כדור צמר גפן או גזה
- \* מכל עמיד לדקירות (ראה שלב ב' 8).


### 1. הסתכל על התווית על העט

- \* ודא שאתה מחזיק את התכשיר הנכון ובמינון הנכון.
- \* בדוק את תאריך התפוגה: אם התאריך עבר אל תשתמש בתכשיר.

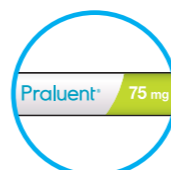

### 2. בדוק את החלון

- \* ודא שהנוזל צלול, ללא צבע או בצבע צהוב בהיר ונקי מחלקיקים - אם לא, אל תשתמש (ראה איור A).
- \* ייתכן ותראה בועת אוויר. זה תקין.
- \* אל תשתמש אם הצבע בחלון הינו צהוב חזק (ראה איור B).

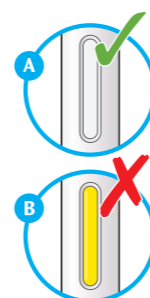


### 3. אפשר לעט להתחמם בטמפרטורת החדר במשך 30 עד 40 דקות.

- \* אל תחמם את העט, תן לו להתחמם לבד.
- \* אל תחזיר את העט למקרר.



### 4. הכן את מקום ההזרקה


- \* שטוף את הידיים עם מים וסבון ויבש אותן עם מגבת.
- \* אתה יכול להזריק ב:
  - ירך
  - בטן (למעט האזור של 5 ס"מ מסביב לטבור)
  - חלק חיצוני של זרוע עליונה (ראה תמונה).
- \* אתה יכול להזריק לעצמך בעודך בישיבה או בעמידה.
- \* נקה את העור באזור ההזרקה עם פד אלכוהול.
- \* אל תזריק בעור רגיש, קשה, אדום או חם.
- \* אל תזריק באזור בו יש וריד נראה לעין.
- \* הזרק כל פעם בנקודה שונה.
- \* אל תזריק פראלואנט באותה נקודה עם תרופות מוזרקות אחרות.

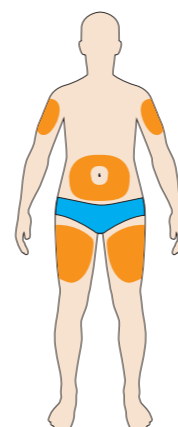

### שלב ב: כיצד להזריק


#### 1. לאחר השלמת כל השלבים של "שלב א: הכנה להזרקה", הסר את הפקק הכחול

- \* אל תסיר את הפקק הכחול לפני שאתה מוכן להזרקה.
- \* אל תחזיר את הפקק הכחול למקומו.

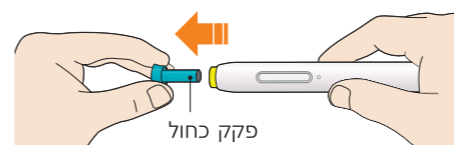


### 2. החזק את עט הפראלואנט בצורה כזו.

- \* אל תיגע במכסה הבטיחות הצהוב.
- \* ודא שאתה יכול לראות את החלון.

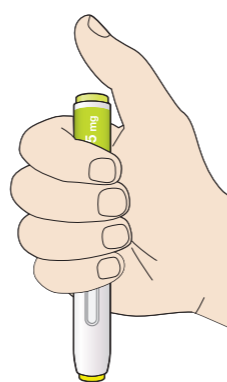

### 3. הצמד את מכסה הבטיחות הצהוב לעורך בזווית של בערך 90°.

- \* לחץ והחזק את העט צמוד לגופך עד שמכסה הבטיחות הצהוב לא נראה יותר. העט לא יעבוד אם מכסה הבטיחות הצהוב לא נלחץ עד הסוף.
- \* במידת הצורך, צבוט את העור כדי לוודא כי מקום ההזרקה הוא יציב.

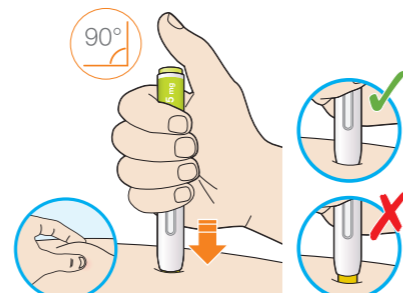


### 4. לחץ על הכפתור הירוק בעזרת האגודל ושחרר מיד.

- \* אתה תשמע קליק. ההזרקה שלך החלה עכשיו.
- \* החלון יתחיל לשנות צבע לצהוב.



### 5. המשך להחזיק את העט בניצב לעורך לאחר שחרור הכפתור \* ההזרקה עשויה להמשך עד 20 שניות.

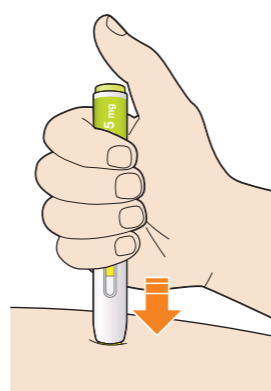


### 6. ודא שהחלון שינה את הצבע לצהוב, לפני שאתה מזיז את העט.

- \* אל תזיז את העט לפני שהחלון כולו הפך לצהוב.
- \* ההזרקה הושלמה כאשר החלון הפך כולו לצהוב, אתה עשוי לשמוע קליק שני.
- \* אם החלון לא הפך לצהוב כולו, התייעץ עם רופא, רוקח או אחות. אל תזריק לעצמך מנה שנייה מבלי לדבר עם הרופא, הרוקח או האחות.



### 7. הרחק את העט מעורך.

- \* אל תשפשף את העור לאחר ההזרקה
- \* אם אתה רואה דם, הצמד כדור צמר גפן או גזה למקום ההזרקה עד שהדימום נפסק.

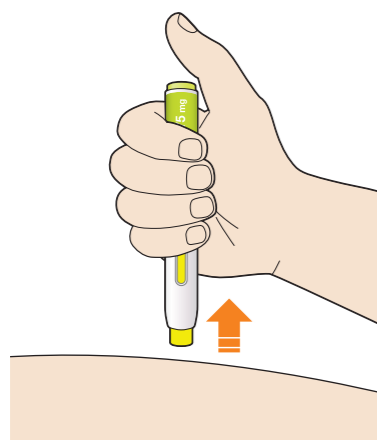

### 8. השלך את העט והפקק.

- \* אל תחזיר את הפקק הכחול למקומו.
- \* השלך את העט ואת הפקק הכחול למכל לאיסוף מחטים ועטים משומשים (עמיד לדקירות) מיד לאחר ההזרקה.
- \* שאל את הרופא, הרוקח או האחות כיצד להשליך את המכל.
- \* שמור תמיד את המכל מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים.

