

הוראות השימוש

דופיקסנט 300 מ"ג עט חד-פעמי מוכן לשימוש


הוראות השימוש מכילות מידע המסביר כיצד להזריק דופיקסנט.

קרא את הוראות השימוש לפני השימוש בעט. אל תזריק לעצמך או למישהו אחר עד שהראו לך כיצד להזריק דופיקסנט. הצוות הרפואי שלך יכול להראות לך או למטפל שלך כיצד להתכונן ולהזריק מנה של דופיקסנט לפני שתנסה לעשות זאת בעצמך בפעם הראשונה. שמור הוראות אלה לשימוש עתידי. התקשר לצוות הרפואי שלך אם יש לך שאלות.

עט הדופיקסנט המוכן לשימוש מיועד לשימוש למבוגרים וילידים מגיל 6 שנים ומעלה.

עט הדופיקסנט המוכן לשימוש הינו אביר חד-פעמי. הוא מכיל 300 מ"ג של דופיקסנט להזרקה מתחת לעור (הזרקה תת עורית).

חלקי עט הדופיקסנט המוכן לשימוש מוצגים מטה:

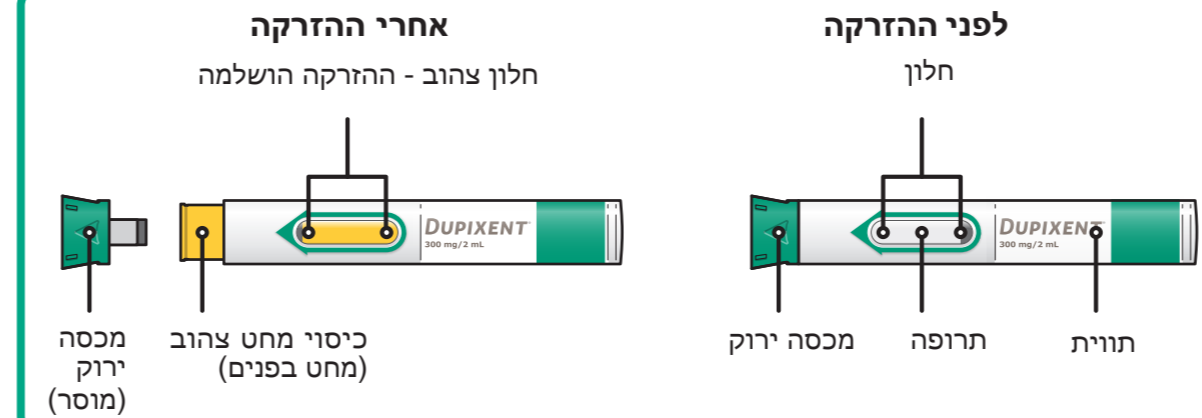

מידע חשוב

- קרא את כל ההוראות בעיון לפני השימוש בעט הדופיקסנט המוכן לשימוש.
- בדוק עם הצוות הרפואי שלך באיזו תדירות תצטרך להזריק את התרופה.
- בילדים בני 12 שנים ומעלה**, מומלץ שדופיקסנט יינתן על ידי מבוגר או תחת השגחתו.
- בילדים מגיל 6 שנים עד פחות מ-12 שנים**, דופיקסנט צריך להינתן על ידי מטפל.
- בחר אתר הזרקה אחר עבור כל הזרקה.
- אל תלחץ או תיגע בכיסוי המחט הצהוב עם אצבעותיך.**
- אל תזריק דרך בגדים.**
- אל תסיר את המכסה הירוק עד ממש לפני ההזרקה.**
- אל תנסה להשיב את המכסה הירוק בחזרה על העט.**
- השלך את העט המשמש מייד לאחר השימוש.
- אל תשתמש שנית בעט הדופיקסנט המוכן לשימוש.**

אחסון דופיקסנט

- שמור עטים טרם השימוש במקרר, בטמפרטורה שבין 2°C-8°C.
- שמור את העטים באריזה המקורית בכדי להגן מאור.
- אם נדרש, ניתן לאחסן את עטי הדופיקסנט בטמפרטורת החדר (עד 25°C) למשך עד **14 ימים**.
- אל** תאחסן עטי דופיקסנט בטמפרטורת חדר גבוהה מ-25°C.
- אחרי הוצאת עט דופיקסנט מהמקרר, יש להשתמש בו בתוך 14 ימים או להשליכו.
- אין** לנער את העט אף פעם.
- אין** לחמם את העט.
- אין** להקפיא את העט.
- אין** להניח את העט באור שמש ישיר.
- שמור את עטי הדופיקסנט ותרופות אחרות מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים.**

א. התכונן להזריק

1: הכן ציוד

בחר משטח עבודה נקי ושטוח. ודא שיש לך את הפריטים הבאים:

- עט הדופיקסנט
- *מטלית אלכוהול
- *כדור צמר גפן או פד גזה
- *מכל עמיד לניקוב (ראה שלב ד)
- *פריטים אלו אינם כלולים באריזת התכשיר

2: בדוק את העט

אל תשתמש בעט הדופיקסנט אם הוא ניזוק. אל תשתמש בעט הדופיקסנט אם המכסה הירוק חסר או שאינו מהודק היטב. אל תשתמש בעט הדופיקסנט אם החלון הוא צהוב לפני השימוש.

3: התבונן בתווית

בדוק את התכשיר והמנה

- ודא שיש לך את התכשיר הנכון ואת המנה הנכונה.

בדוק את תאריך התפוגה.

- אין להשתמש בעט הדופיקסנט אם תאריך התפוגה עבר.



4: בדוק את התרופה



התבונן בתרופה דרך החלון. היא צריכה להיות צלולה וחסרת צבע עד גוון צהוב חיוור.

- שים לב: ייתכן שתראה בועת אוויר, זה תקין.
- אל תשתמש בעט אם הנוזל שינה צבעו או עכור, או אם הוא מכיל פתיתים או חלקיקים נראים לעין.**


5: המתן 45 דקות



- הנח את עט הדופיקסנט על משטח שטוח ותן לו להתחמם באופן טבעי בטמפרטורת החדר, הנמוכה מ-25°C למשך לפחות 45 דקות.
- אל תחמם את עט הדופיקסנט במכשיר מיקרוגל, במים חמים או באור שמש ישיר.**

ב. בחר והכן את אתר ההזרקה

1: רחץ את ידיך היטב עם סבון ומים

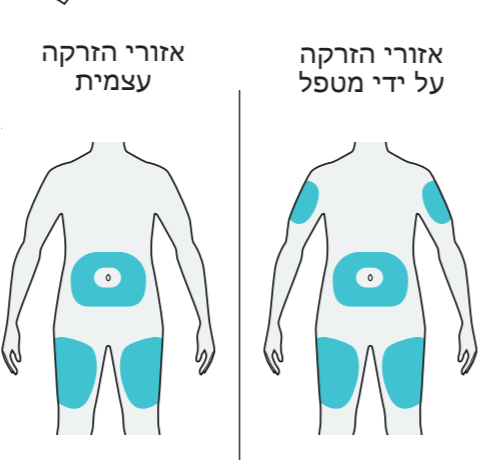


2: בחר אתר ההזרקה

- ירך**
- בטן**, למעט 5 ס"מ סביב הטבור שלך.
- מטפל יכול להזריק גם לאזור החיצוני של **הזרוע העליונה** שלך.
- בחר אתר הזרקה שונה בכל פעם שאתה מזריק דופיקסנט.
- אין להזריק לתוך עור רגיש, פגוע, חבול או מצולק או לאזורים עם ורידים נראים לעין.**
- אין להזריק דרך בגדים.**


3: הכן את אתר ההזרקה

- נקה את אתר ההזרקה עם מטלית אלכוהול.
- תן לעור להתייבש לפני ההזרקה.
- אל תיגע באתר ההזרקה שוב ואל תנשוף עליו לפני ההזרקה.**

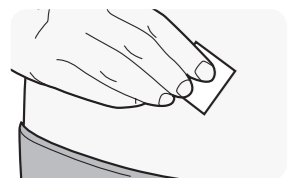

ג. מתן הזריקה

1: הסר את המכסה הירוק

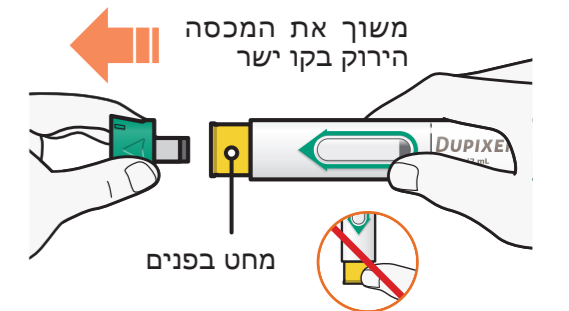


- הסר את המכסה הירוק על ידי משיכתו כפי שמוצג באיור. **אל תסובב** את המכסה הירוק.
- אל תסיר את המכסה הירוק עד שאתה מוכן להזריק.**
- אל תיגע או תלחץ על כיסוי המחט הצהוב באצבעותיך.** המחט נמצאת בפנים.
- אל תשים את המכסה הירוק בחזרה על העט אחרי שהסרת אותו.**

2: צבוט את העור ומקם

צבוט את העור לפני ובמשך ההזרקה.

- החזק את עט הדופיקסנט כך שתוכל לראות את החלון. מקם את כיסוי המחט הצהוב על העור.
- מקם את כיסוי המחט הצהוב על העור בזווית של 90 מעלות בקירוב.
- צביטת העור אינה נדרשת עבור מבוגרים וילדים מגיל 12 שנים ומעלה.

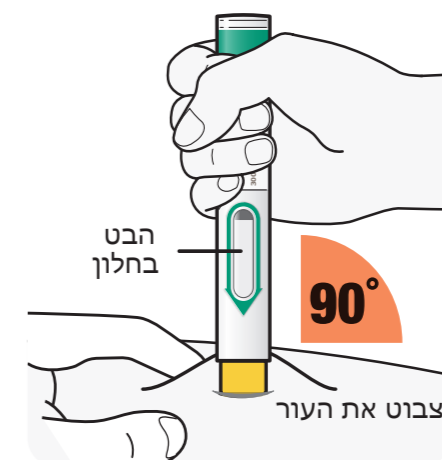

3: לחץ כלפי מטה - הבט בחלון עד שהוא הופך להיות לגמרי צהוב - אז ספור עד 5



לחץ והחזק את עט הדופיקסנט בחוזקה כנגד העור עד **שלא תוכל לראות את כיסוי המחט הצהוב.**


- ישמע "קליק" 1
- וזה
- החלון יתחיל להפוך לצהוב.
- המשך ללחוץ** את עט הדופיקסנט כנגד העור.

המשך ללחוץ את עט הדופיקסנט כנגד העור והבט בחלון:

- החלון יהפוך להיות לגמרי צהוב, וזה תשמע "קליק" שני.
- המשך ללחוץ** את עט הדופיקסנט כנגד העור.

המשך ללחוץ את עט הדופיקסנט כנגד העור וספור עד **5 כדי לוודא שאתה מקבל את המנה המלאה.**

4: הסר

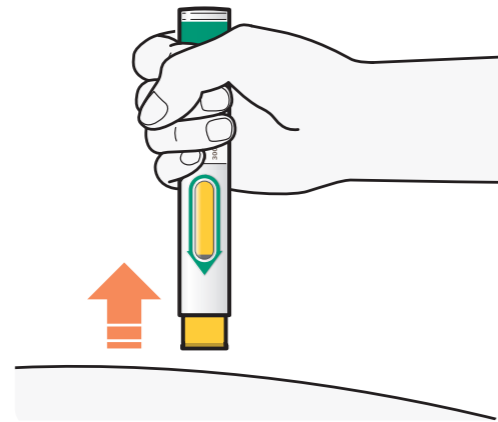

- לאחר שהשלמת את ההזרקה, משוך ישר כדי להוציא את עט הדופיקסנט מהעור. כיסוי המחט הצהוב יכסה את המחט.
- אם אתה רואה דם באתר ההזרקה, נגב בעדינות עם כדור צמר גפן או פד גזה.
- אל תשפשף את העור אחרי ההזרקה.**

אם החלון לא הופך להיות צהוב לגמרי, או אם נראה שהתרופה עדיין יוצאת מהעט, ייתכן ולא קיבלת את המנה המלאה. השלך את העט ופנה מייד לצוות הרפואי שלך.

אל תיתן מנה שנייה מבלי להתייעץ עם הצוות הרפואי.

ד. השלכת עט הדופיקסנט המשומש

כיצד להשליך את עט הדופיקסנט

השלך עטי דופיקסנט משומשים ומכסים ירוקים למכל עמיד לניקוב, מייד לאחר השימוש.

- אל תשליך עטי דופיקסנט משומשים ומכסים ירוקים לאשפה הביתית.**



אל תחזיר את המכסה הירוק לעט.

שמור את המכל הרחק מהישג ידם וטווח ראייתם של ילדים.