


הוראות שימוש

פראלואנט 75 מ"ג תמייסה להזרקה בעט מוקן לשימוש

החלקים של עט הפראלואנט מתוארים בתמונה זו.

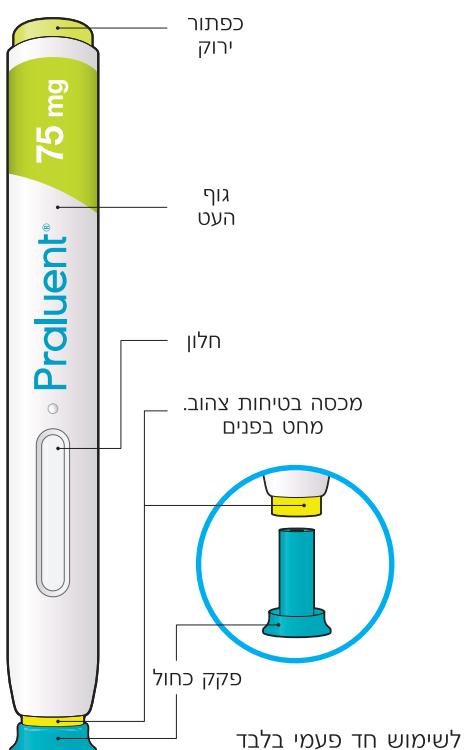


1. הסתכל על התווית על העט

- * וודא שאתה יכול לראות את התווית הנכון ובמין הנכון.
- * בדוק את תאריך התפוגה: אם התאריך עבר אל תשתמש בתכשיר.

2. בדוק את החלון

- * וודא שהנוול צלול, ללא צבע או בצלב צהוב בהיר וכן מחלקיים.
- אם לא, אל תשתמש (ראה איור A).
- * יתכן ותראה בועת אוויר. זה תקין.
- * אל תשתמש אם הצבע בחולון הינו צהוב חזק (ראה איור B).

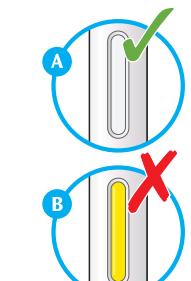


3. אפשר לעט להתחם בטמפרטורת החדר במשך 30 עד 40 דקות.

- * אל תחם את העט, תן לו להתחם בלבד.
- * אל תחזיר את העט למקורה.



4. הנק את מקום ההזרקה


- * שטוף את הידיים עם מים וסבון ויבש אותן עם מגבת.
- * אתה יכול להזריק ב:
 - ירך
 - בטן (למעט האזור של 5 ס"מ מסביב לטברן)
 - חלק חיוני של זרוע עליונה (ראה תמונה).
 - * אתה יכול להזריק לעצמך בעודף ישיבה או בעמידה.
 - * נקעה את העור באזורי ההזרקה עם פד אלכוהול.
 - * אל תזריק בעור רגיש, קשה, אדום או חם.
 - * אל תזריק באזור בו יש וריד נראת לעין.
 - * הזרק כל פעם בנקודה שונה.
 - * אל תזריק פראלואנט באותה נקודה עם תרופות מזוכקות אחרות.

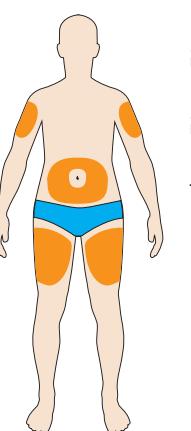

שלב ב: כיצד להזריק

1. לאחר השלמת כל השלבים של "שלב א: הכנה להזרקה", הסר את הפקק הכהול

- * אל תסיר את הפקק הכהול לפני שאתה מוכן להזרקה.
- * אל תחזיר את הפקק הכהול למוקומו.

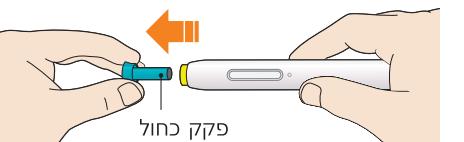

2. החזק את עט הפראלואנט בצוואר צוואר.

- * אל תיגע במכסה הבטיחות הצהוב.

- * התויפה מוזרקת מתחת לעור שLR ויכולת להינתק על ידך או להינתק בעורמת מישחו אחר (מטפל).
- * ניתן להשתמש בעט זה רק פעמי אחד, לאחר השימוש יש להשליכו.


- עשה:**
- ✓ שמר את עט הפראלואנט מחוץ להשיג ידם ושדה ראייתם של ילדים.
- ✓ קרא בעיון את כל ההוראות לפני השימוש בפראלואנט.
- ✓ נהג לפি ההוראות בכל פעם שאתה משתמש בפראלואנט.

- אל תעשה:**
- ✗ אל תיגע במכסה הבטיחות הצהוב.
- ✗ אל תשתמש בעט אם הוא נפל או נפגע.
- ✗ אל תשתמש בעט אם הפקק הכהול חסר או לא מחובר בצוואר בטוחה.
- ✗ אל תעsha שימוש חוזר בעט.
- ✗ אל תנער את העט.
- ✗ אל תקפיא את העט.
- ✗ אל תחשוף את העט לאור שימוש ישיר.
- ✗ אל תחשוף הוראות אלו. אם יש לך שאלות פנה לרופא, לרוקח או לאחות.

שלב א: הכנה להזרקה: לפני שתתחיל הנק לעצמך:

- * עט הפראלואנט
- * פדי אלכוהול
- * כדור צמר גפן או גזה

- * מכל עמיד לדקירות (ראה שלב ב' 8).

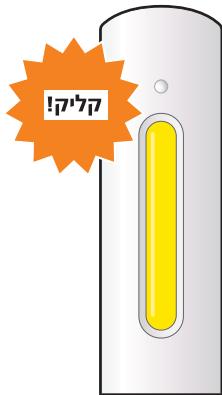


- 6. ודא שהחולון שינוי הצבע לצהוב, לפני שאתה מזיז את העט.**
- * אל תזיז את העט לפני שהחולון כולו יהיה צהוב.
 - * הזרקה הושלמה כאשר החלון הפוך כולו צהוב, אתה עשי שמעו קליק שני.
 - * אם החלון לא הפוך לצהוב כולו, התייעץ עם רופא, רוקח או אחות. אל תזריק לעצמך ממנה שנייה מבלי לדבר עם הרופא, הרוקח או האחות.

- * וודא שאתה יכול לראות את החלון.



3. הצמד את מכסה הבטיחות הצהוב לעורך בזווית של 90°.

- * לחץ והחזק את העט צמוד לגוף עד שמכסה הבטיחות הצהוב לא נראה יותר. העט לא יעבוד אם מכסה הבטיחות הצהוב לא נלחץ עד הסוף.
- * במידת הצורך, צבוט את העור כדי לוודא כי מקום ההזרקה הוא יציב.

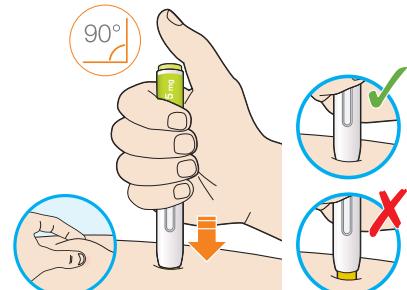

4. לחץ על הכפתור הירוק בעזרת האגדול ושלחרו מיד.



5. המשך להחזיק את העט בኒיצב לעורך לאחר שחרור הכפתור

- * ההזרקה עשויה להמשך עד 20 שניות.

