



הוראות שימוש במשאף אולטיברו בריזהלר
אנא קרא את הוראות השימוש המלאות לפני שימוש באולטיברו בריזהלר.

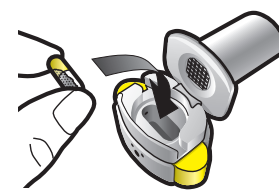


הכנס

1

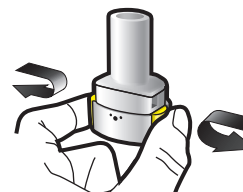


נקב ושחרר

2

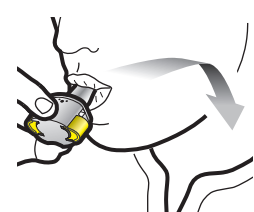


שאף עמוק

3

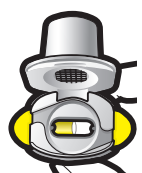


בדוק שהכמוסה ריקה

בדוק

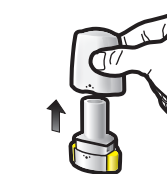


שלב א:1

משוך את המכסה כלפי מעלה

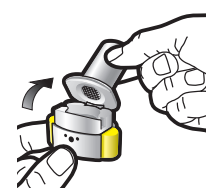

שלב ב:1


פתח את המשאף

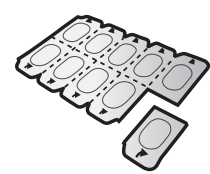

שלב ג:1

הוצא את הכמוסה


הפרד חלק מהמגשית המכיל כמוסה אחת מהמגשית השלמה. קלף את הרדיד מרצועת המגש כדי להוציא את הכמוסה. אין לדחוף החוצה את הכמוסה דרך הרדיד. אין לבלוע את הכמוסה.

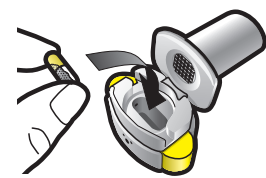

שלב ד:1


הכנס את הכמוסה

לעולם אין להכניס את הכמוסה ישירות לתוך הפיה.

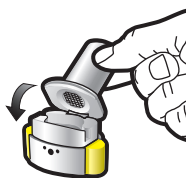

שלב ה:1


סגור את המשאף

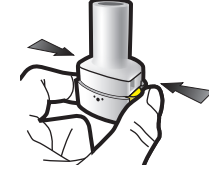

שלב א:2

נקב את הכמוסה פעם אחת

החזק את המשאף במצב אנכי. נקב את הכמוסה על-ידי לחיצה בחוזקה על שני הכפתורים הצידיים בו זמנית. אתה אמור לשמוע רעש כשהכמוסה מנוקבת. נקב את הכמוסה פעם אחת בלבד.

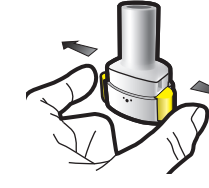

שלב ב:2

שחרר את הכפתורים הצידיים



שלב א:3

נשוף החוצה באופן מלא

אין לנשוף לתוך המשאף.



שלב ב:3

שאף עמוק את התרופה


החזק את המשאף כמודגם באיור. שים את הפיה בתוך הפה וסגור היטב את השפתיים סביבה. אין ללחוץ על הכפתורים הצידיים. נשום פנימה במהירות, עמוק ככל האפשר. במהלך השאיפה אתה תשמע צליל של רשרוש. אתה עלול לחוש בטעם של התרופה במהלך השאיפה.



שלב ג:3

עצירת נשימה


עצור את נשימתך למשך 5 שניות.

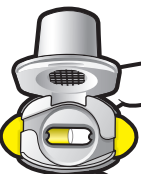

בדוק שהכמוסה ריקה

פתח את המשאף כדי לראות אם נשארה אבקה בתוך הכמוסה.

- אם נשארה אבקה בתוך הכמוסה:
- סגור את המשאף
- חזור על שלבים 3 א עד 3 ג.

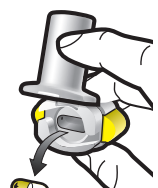

הוצא את הכמוסה הריקה

השלך את הכמוסה הריקה באשפה הביתית. סגור את המשאף והחזר את המכסה למקומו.

מידע חשוב

- תמיד יש לאחסן את הכמוסות של אולטיברו בריזהלר בתוך המגשית ולהוציאן רק מיד לפני השימוש.
- אין לדחוף את הכמוסה דרך הרדיד כדי להוציא את הכמוסה.
- אל תבלע את הכמוסה.
- אל תשתמש בכמוסות אולטיברו בריזהלר עם משאף אחר.
- אל תשתמש במשאף של אולטיברו בריזהלר לנטילה של כמוסות אחרות.
- לעולם אל תשים את הכמוסה בפוך או בפיית המשאף.
- אל תלחץ על הכפתורים הצידיים יותר מפעם אחת.
- אל תנשוף לתוך פיית המשאף.
- אל תלחץ על הכפתורים הצידיים בזמן שאתה שואף בעזרת הפיה.
- אל תשתמש בכמוסות עם ידיים רטובות.
- לעולם אל תשטוף את המשאף שלך במים.

שאלות נפוצות

למה המשאף לא השמיע רעש בזמן שאני שואף את התרופה?

יתכן שהכמוסה נתקעה בתא הכמוסה. אם הדבר קורה, שחרר בזהירות את הכמוסה על-ידי טפיחה על בסיס המשאף. יש לשאוף את התרופה שוב על-ידי חזרה על שלבים 3 א עד 3 ג.

אם נותרה אבקה בתוך הכמוסה, מה עלי לעשות?

לא קיבלת מספיק תרופה. סגור את המשאף וחזור על שלבים 3 א עד 3 ג.

השתעלתי לאחר שאיפת התרופה. האם זה משמעותי?


זה עלול לקרות. כל עוד הכמוסה ריקה, קיבלת מספיק מהתרופה.

הרגשתי פיסות קטנות של הכמוסה על הלשון שלי. האם זה משמעותי?

זה עלול לקרות. זה לא מזיק. הסיכויים שהכמוסה תישבר לפיסות קטנות עולים אם הכמוסה מנוקבת יותר מפעם אחת.

אריזה אחת של אולטיברו בריזהלר מכילה:

- משאף אולטיברו בריזהלר אחד
- מגשית אחת או יותר המכילה כל אחת 10 כמוסות אולטיברו בריזהלר, לשימוש בתוך המשאף

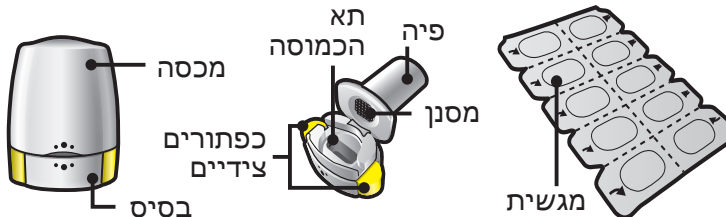

משאף בסיס המשאף מגשית

ניקוי המשאף

יש לנגב את הפיה מבפנים ומבחוץ עם בד נקי ויבש ללא מוך, כדי להסיר שאריות אבקה. יש לשמור את המשאף יבש. לעולם אל תשטוף את המשאף עם מים.

השלכת המשאף לאחר שימוש

יש להשליך את המשאף לאחר 30 ימי שימוש. שאל את הרוקח כיצד להשליך תרופות ומשאפים שאינם נחוצים עוד.

