


הוראות שימוש

אמגליטי 120 מ"ג תמיסה להזרקה בעט מוכן לשימוש

גלקנזומאב

לשימוש תת-עורי

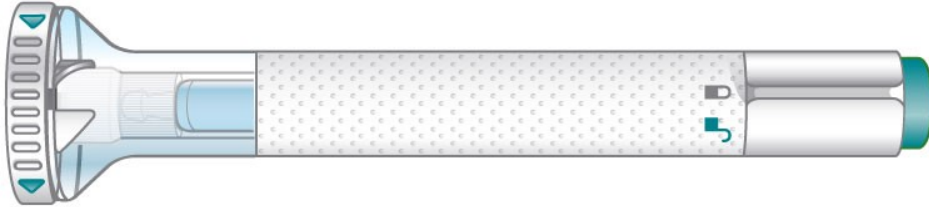

לפני השימוש בעט המוכן לשימוש (עט) שברשותך:


מידע חשוב

- הרופא או האחיות אמורים להראות לך כיצד להכין ולהזריק אמגליטי באמצעות שימוש בעט. אין להזריק לעצמך או לאדם אחר עד אשר תודרך לביצוע הזרקת אמגליטי.
- שמור הוראות אלו ועיין בהן לפי הצורך.
- כל עט מיועד לשימוש חד-פעמי בלבד. אין לחלוק את העט שברשותך ואין לעשות בו שימוש חוזר. אחרת אתה עלול להעביר זיהום או ללקות בזיהום.
- העט מכיל חלקי זכוכית. יש לטפל בו בזהירות. אם תפיל אותו על משטח קשה, אין להשתמש בו. השתמש בעט חדש לצורך ההזרקה.
- הרופא, הרוקח או האחיות יכולים לעזור לך לבחור את אזור הגוף בו תזריק את המנה. כמו כן, אתה יכול לקרוא את הסעיף "**בחר את מקום ההזרקה**" בהוראות אלו לקבלת עזרה בבחירת האזור המתאים ביותר עבורך.
- אם אתה סובל מבעיות ראייה או שמיעה, אין להשתמש בעט ללא עזרת מטפל.

הוראות שימוש

לפני השימוש בעט אמגליטי, קרא ופעל בקפידה לפי כל ההוראות שלב אחר שלב.

חלקי העט של אמגליטי

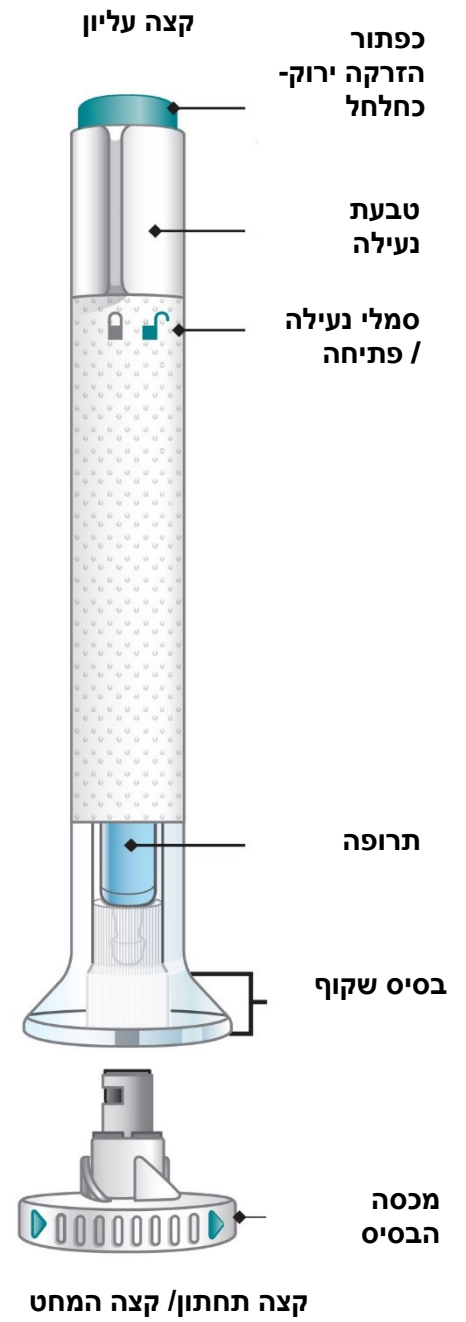

לפני שאתה מתחיל

הוצא את העט מהמקרר

החזר את האריזה המקורית עם כל העטים שטרם השתמשת בהם למקרר.

השאר את מכסה הבסיס במקומו עד אשר תהיה מוכן להזריק.

אין לנער.

להזרקה נוחה יותר, השאר את העט בטמפרטורת החדר במשך 30 דקות לפני ההזרקה.

אין לחמם את העט באמצעים שונים (בתנור מיקרוגל, מים חמים, שמש ישירה)


בדוק את העט ואת התרופה

ודא כי בידיך התרופה הנכונה. התרופה שבתוך העט אמורה להיות שקופה. היא יכולה להיות חסרת צבע עד צהבהבה או חומה.

אין להשתמש בעט ויש להשליך אותו לפי הוראות הרופא, הרוקח או האחיות אם:

- העט נראה פגום
- התרופה עכורה, בעלת צבע דהוי, או מכילה חלקיקים קטנים
- תאריך התפוגה המודפס על התווית חלף
- התרופה קפואה

תאריך תפוגה

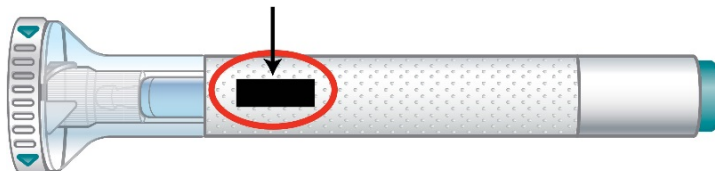

התכונן להזרקה


רחץ את ידיך במים וסבון בטרם תזריק אמגליטי. ודא כי מיכל פסולת חדה נמצא בקרבתך.

הרופא, הרוקח או האחיות יכולים לעזור לך לבחור את מקום ההזרקה המתאים ביותר עבורך.


- **אתה** יכול להזריק את התרופה לאזור הבטן או לירך. אין להזריק בטווח של 5 ס"מ סביב הטבור.
- **אדם אחר** יכול להזריק לך את התרופה לאזור האחורי של הזרוע העליונה או לעכוז.

בחר את מקום ההזרקה שלך


- אין להזריק באותה הנקודה בה הזרקת בעבר. לדוגמה, אם ההזרקה הראשונה בוצעה בבטן, ההזרקה הבאה יכולה להתבצע באזור אחר בבטן.
- נקה ויבש את מקום ההזרקה לפני שאתה מזריק.

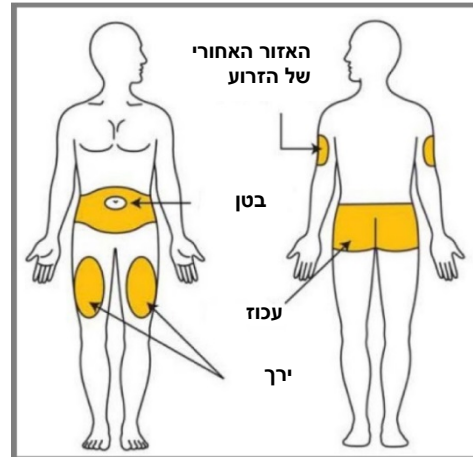

1 הסר את מכסה העט


ודא כי העט נעול. השאר את מכסה הבסיס במקומו עד אשר תהיה מוכן להזריק. 


- כאשר תהיה מוכן להזריק, הסר את מכסה הבסיס תוך כדי סיבוב והשלך אותו לפח.
- אין להחזיר את מכסה הבסיס למקומו – הדבר עלול לגרום נזק למחט.
- אין לגעת במחט.

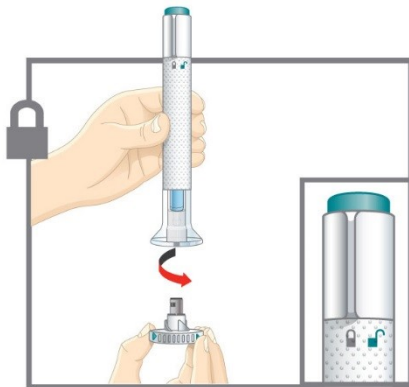


2 הצמד ופתח

- הצמד את הבסיס השקוף אל עורך והחזק אותו באופן צמוד ובחוזקה.

סובב את טבעת הנעילה למצב פתיחה. 

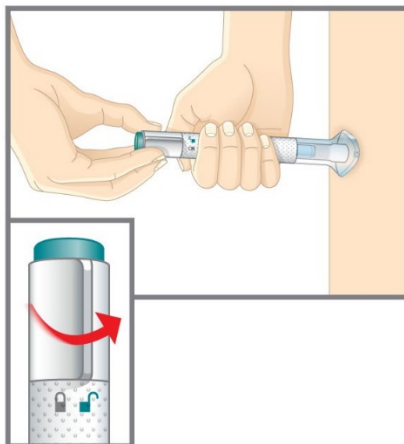


3 לחץ והחזק

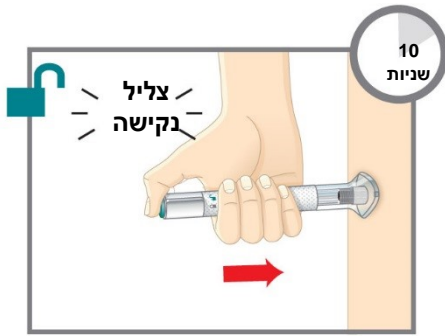

- לחץ והחזק את כפתור ההזרקה הירוק-כחול; תשמע צליל נקישה רם.

- המשך להצמיד את הבסיס השקוף בחוזקה אל העור. תשמע צליל נקישה שני בחלוף כ- 5 עד 10 שניות לאחר הצליל הראשון. צליל הנקישה השני אומר לך שההזרקה הושלמה.

- הסר את העט מעורך.

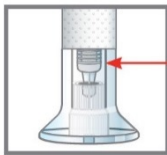

תדע שההזרקה הושלמה כאשר תוכל לראות את הבוכנה האפורה.

לאחר הזרקת התרופה



השלך את העט

אין להחזיר את מכסה הבסיס למקומו. יש להשליך את העט למיכל פסולת חדה או לפי הוראות הרופא, הרוקח או האחיות.

כאשר אתה משליך את העט ואת מיכל הפסולת החדה:

- אין למחזר את מיכל הפסולת החדה המלא.
- שאל את הרופא, הרוקח או האחיות כיצד להשליך תרופות בהן אינך משתמש עוד.

שאלות נפוצות

ש. מה לעשות אם אני רואה בועות אוויר בעט?

ת. נוכחות בועות אוויר בעט היא תופעה נורמלית. אמגליטי מוזרק מתחת לעור (הזרקה תת-עורית).

ש. מה לעשות אם ישנה טיפת נוזל בקצה המחט כאשר אני מסיר את מכסה הבסיס?

ת. טיפת נוזל בקצה המחט היא תופעה תקינה.

ש. מה לעשות אם שחררתי את הנעילה של העט ולחצתי על כפתור ההזרקה הירוק-כחלחל לפני שסובבתי את מכסה הבסיס?

ת. אין להסיר את מכסה הבסיס. השלך את העט והבא עט חדש.

ש. האם עלי ללחוץ על כפתור ההזרקה כלפי מטה עד להשלמת ההזרקה?

ת. הדבר אינו הכרחי, אך עשוי לעזור לך לשמור על העט במצב יציב וצמוד אל העור.

ש. מה לעשות אם המחט לא נסוגה לאחר ההזרקה?

ת. אין לגעת במחט ואין להחזיר את מכסה הבסיס למקומו. יש לאחסן את העט במקום בטוח על מנת למנוע דקירת מחט מקרית. פנה לרופא, לרוקח או לאחות לקבלת הוראות לגבי אופן החזרת העט.

ש. מה לעשות במקרה של הופעת טיפת נוזל או דם על עורי לאחר ההזרקה?

ת. זוהי תופעה נורמלית. לחץ פיסת צמר גפן או גאזה על פני מקום ההזרקה. אין לשפשף את מקום ההזרקה.

ש. מה לעשות אם אני שומע יותר מ-2 צלילי נקישה במהלך ההזרקה – 2 צלילי נקישה רמים וצליל רך אחד. האם קיבלתי את הזריקה המלאה?

ת. חלק מהמטופלים עשויים לשמוע צליל נקישה רך לפני צליל הנקישה הרם השני. זוהי פעולה נורמלית של העט. אין להסיר את העט מן העור עד אשר תשמע את צליל הנקישה הרם השני.

ש. כיצד אוכל לדעת שההזרקה הושלמה?

ת. לאחר שתלחץ על כפתור ההזרקה הירוק-כחלחל, תשמע 2 צלילי נקישה רמים. הצליל השני אומר לך שההזרקה הושלמה. כמו כן, תראה את הבוכנה האפורה מעל הבסיס השקוף.

קרא את עלון האריזה המלא עבור אמגליטי הנמצא בתוך קופסה זו על מנת ללמוד עוד אודות התרופה שלך.

בעל הרישום: אלי לילי ישראל בע"מ, רחוב השיזף 4, ת.ד. 4246, רעננה 4366411
יצרן: אלי לילי בע"מ, אינדיאנפוליס, אינדיאנה, ארה"ב.

נערך ביוני 2020.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.